

TRYm


DRAKEN[®]

Dispositivo dinámico interespinoso



MENOS
INVASIVO
MAYOR
EFICIENCIA

El dispositivo **Draken®** nace con la premisa de mejorar la concepción de los sistemas dinámicos lumbares, proponiendo una técnica quirúrgica **mínimamente invasiva** de gran simplicidad, con la ventaja de la máxima preservación del complejo ligamentario supraespinoso e interespinoso.

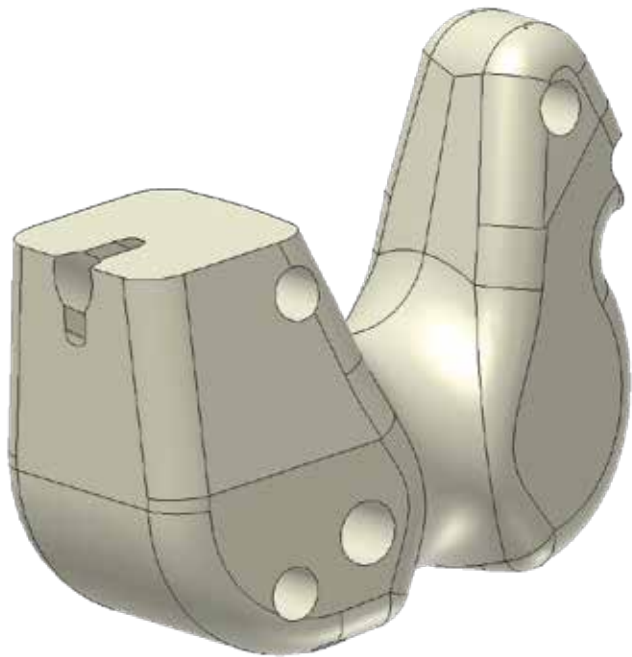

*“el dispositivo **Draken®** fue pensado para elevar la calidad de vida, cumpliendo con algunas características distintivas”*

Monoportal

Otorga la cualidad de un abordaje percutáneo con procedimiento de piel a piel en 15 minutos.



Anclado por sí mismo

El diseño bajo ésta condición conlleva a que el dispositivo quede fijado por se gracias a la máxima preservación de las estructuras anatómicas.

Mínimamente invasivo

Es sinónimo de menor complejidad quirúrgica, asegurando, entre otros aspectos:

- ◆ Menor injuria anatómica
- ◆ Reducido tiempo de cirugía
- ◆ Baja exposición a la anestesia
- ◆ Escasa pérdida de sangre
- ◆ Leve estrés quirúrgico
- ◆ Pronta recuperación
- ◆ Mejor calidad de vida
- ◆ Brevísima estadía hospitalaria



Estudio de Caso

Paciente:

Sexo Femenino,
49 años.

Diagnóstico:

Hernia de disco
L4-L5 y L5-S1.

Síntomas:

Lumbociática severa
bilateral con claudicación
en la marcha.

Cirugía:

Tamaño del implante:
8mm (2 unidades) 10mm.

Recuperación:

Remisión de los síntomas
en el post-operatoio
inmediato, continuando
con la misma evolución
luego de los 12 meses de
la cirugía.

Pasos de la técnica quirúrgica




1- Posicionamiento:

El paciente se coloca en decúbito ventral en flexión.



2- Definición del espacio:

Se identifica los niveles a instrumentar con control radioscópico demarcando el extremo de las espinosas.

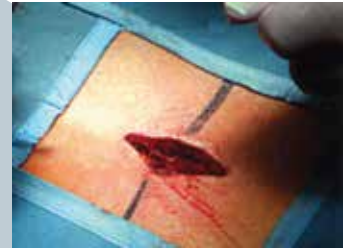

3- Incisión:

Se realiza una incisión monoportal de 2cm, para luego divulsionar el espacio llegando a la carilla articular.



4- Ojal:

Una pinza angulada ingresa enfrentándose al ligamento interespinoso, la cual gira a 90° y efectúa por presión un ojal en el tejido.




5- Distracción y Medición:

La pinza practica la apertura del espacio para medir e indicar el tamaño del implante.



6- Probadores:

Se instrumenta medidor para ratificar la elección del tamaño del implante.

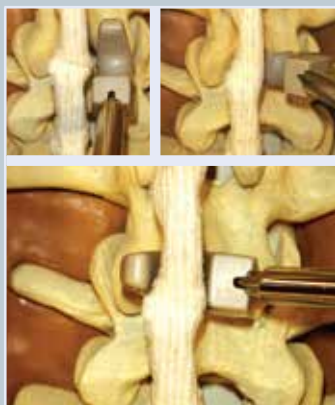


7- Abordaje:

Se introduce el implante paralelo a las espinosas identificando el ojal; con una maniobra de giro sobre su eje se lo enfrenta al punto de inserción, donde ingresa por empuje y con un movimiento de rotación.



8- Sutura:

Se puede completar la estabilización con un ligamento de mersilene cuyo pasaje se practica sobre los orificios del implante.

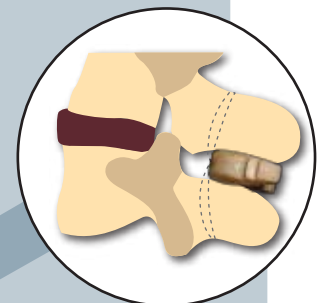

INSTRUMENTAL

1 COLOCADOR 2 MANGO DE PROBADOR 3 PINZA INICIADORA 4 SEPARADOR DE TAYLOR 5 PROBADORES



IMPLANTE:

SEPARADOR INTERESPINOSO

Implante Código

8 mm	—	35030008
10 mm	—	35030010
12 mm	—	35030012
14 mm	—	35030014

Arregui 2240
Capital Federal - Argentina
Tel./Fax (54 11) 2053-2717
trym@trym.com.ar
www.trym.com

TRYM